

ZenZipp – haavanhoitopussit runsaasti erittäville haavoille

Kaikki tarvittava samassa pussissa – optimaaliseen haavan hoitoon

Hoitajien, potilaiden ja asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä kehitetty ainutlaatuinen ja käytännöllinen haavanhoitopussi ZenZipp on täynnä ominaisuuksia.

Voidaan käyttää jopa seitsemän (7) päivää, vähentäen sidoksen vaihdon aiheuttamaa epämukavuutta potilaalle ja säästään myös aikaa ja kustannuksia. Joustava ja ihoystävällinen hydrokolloidi tarttuu nopeasti ihoon, helppo leikata muotoon ja kestää hyvin haavan eritteet. Sulkee hajuja sisäänsä. Laaja valikoima kokoja, joista löytyy sopiva kaikenlaisille haavoille.

Läpinäkyvästä sidoksesta on kätevää tarkastaa haavan tilanne ja koko pussin mittainen vetoketju tarjoaa hoitajalle ongelmattoman pääsyn haavaan ja tilaa työskennellä. Vetoketju on helppo avata ja sulkea. Hanan avulla pussin tyhjennys sujuu tehokkaasti – isokokoisessa jopa kolme hanaa eri puolilla sidosta, jolloin se voidaan asettaa miten päin vaan. Ylimääräiset hanat voidaan kätevästi leikata pois tarvittaessa.



ZenZipp – haavanhoitojärjestelmän edut

Pitkäkestoinen käyttö on miellyttävää potilaalle

Joustava hydrokolloidi kiinnittyy tiiviisti iholle ja on vuotovapaa. Pysyy iholla jopa seitsemän päivää, vähentäen sidoksen vaihdon aiheuttamaa epämukavuutta potilaalle. Tämä säästää myös aikaa ja kustannuksia.

Läpinäkyvä työskentelypaneeli antaa hyvän näkyvyyden haavaan
Suuri, läpinäkyvä paneeli antaa hyvän näkyvyyden haavaan ja integroitu sekä tiivis, koko pussin mittainen vetoketju tarjoaa hyvän työskentelytilan haavanhoitoon.

Tarranauhat ja iso vetoketju vapauttavat kädet työskentelyyn
Isommissa pussikoossa (neljä suurinta) on tarranauhat, joiden avulla pussi pysyy auki erikseen siitä pitelemättä. Näin molemmat kädet jäävät vapaiksi työskentelyä varten.

Muotoon leikattava hydrokolloidi kiinnittyy hyvin iholle ja joustaa
Pehmeä ja hengittävä hydrokolloidi tarjoaa optimaalisen tarttuvuuden ja joustavuuden. Miellyttävä ja hellävarainen iholle. Voidaan leikata haluttuun muotoon, pusseissa myös valmiit leikkuuviivat.

Ainutlaatuinen integroitu venttiili

Venttiilistä voidaan päästää ilmaa haavanhoitopussiin, estäen pussin pinnan koskettamasta haavaa. Korkillisesta venttiilistä voidaan myös annostella haavanhoitoaineita tai halutessaan ottaa myös näytteitä.

Monitoimiset hanat eri puolilla pussia

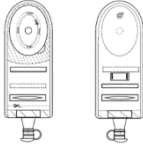
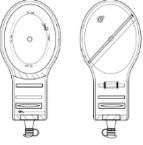
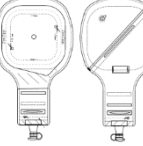
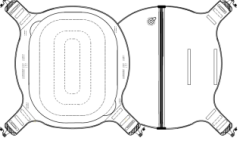
Pusseissa on hanat, joiden avulla eritteet ja nesteet voidaan valuttaa ulos, suunniteltu erityisesti paljon erittäville haavoille. Pehmeä hana on kätevä liittää poistoletkuun ilman sovittimia. Isojen pussien kolme hanaa eri puolilla pussia tarjoavat liikkumatilaa pussin asettamiseen, se voidaan laittaa miten päin vain, sillä aina yksi hana on alassuun helppoa tyhjentämistä varten.

Hanat voidaan myös leikata irti tarvittaessa, ja tällöin pussista voidaan valuttaa esim. paksummat eritteet isosta suuaukosta ja sulkea ne taitettavalla tarrakiinnityksellä tiiviiksi.

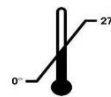


Tuotetiedot ZenZipp – haavanhoitopussit

Sopiva koko jokaiselle haavalle, kaikissa tuotteissa venttiili ja hana, koko XS ilman vetoketjua

	Tuotekoodi / REF	Koko	Vetoketju	Leikkuuala (mm)	Pakkaus-koko
	ZZ050030N	Extra Small XS		50x30	10
	ZZ110075	Small S	✓	110x75	10
	ZZ110110	Small Square SQ	✓	110x110	5
	ZZ170120	Medium M	✓	170x120	3
	ZZ220170	Medium Plus MP	✓	220x170	3
	ZZ270190	Large L	✓	270x190	3
	ZZ390240	Extra Large XL	✓	390x240	3

STERILE R



0088